

Bedienungsanleitung

Verwendungszweck

Trageanleitung

- Ultrahuman Ring AIR ('Ring') kann jederzeit an beiden Händen getragen werden. Wir empfehlen, den Ring am Zeige-, Mittel- oder Ringfinger zu tragen. Wenn keine der Größen zu diesen Fingern passt, können Sie den Ring an Ihrem Daumen oder kleinen Finger tragen.
- Der Ring benötigt 7-14 Tage, um zu kalibrieren und eine Basislinie festzulegen. Sie müssen sich einer Neukalibrierungsphase unterziehen, wenn Sie einen Werksreset durchführen möchten.

Speicherspeicher

- Der Ring kann Daten bis zu 6 Tage lang speichern, ohne eine Verbindung zur Ultrahuman-App herzustellen. Ihre auf dem Ring gespeicherten Daten gehen verloren, wenn der Akku leer ist, ohne mit der Ultra Human-App synchronisiert zu werden. Für die beste Erfahrung empfehlen wir, Ihre Daten täglich zu synchronisieren.

Aufladen des Akkus

- Ein voll aufgeladener Ring kann bis zu 6 Tage halten. Es dauert bis zu 2-3 Stunden, um den Ring vollständig aufzuladen. Wir empfehlen das Laden mit der mitgelieferten Ladestation.

- Vermeiden Sie es, den Ring mit Schnellladegeräten oder Ladegeräten von Drittanbietern aufzuladen, da dies die Akkulaufzeit des Rings beeinträchtigen kann.
- Es wird erwartet, dass der Ring während des Ladevorgangs leicht warm wird. Sie können Ihren Ring sicher tragen, nachdem Sie ihn aus dem Ladegerät genommen haben. Wenn sich der Ring zu heiß anfühlt, schreiben Sie bitte an unseren Support unter support@ultrahuman.com.
- Der Ring verfügt über miniaturisierte Sensoren und eine Batterie. Bitte vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit anderen Batterien oder elektronischen Geräten mit Batterien. Es besteht die Gefahr von Kurzschlüssen, ähnlich wie bei anderen Standard-Metallringen.
- Am Ende seiner Lebensdauer sollte die Batterie des Rings als Elektronikschrott entsorgt werden. Um Elektroschrott zu entsorgen, besuchen Sie eine von den örtlichen Behörden festgelegte Sammelstelle für die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling.

WARNUNG

Die Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnungen kann zu Schäden, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen führen.

Vermeiden Sie elektrischen Kontakt. Der Ring besteht aus einer Titanschale und die meisten Ringe haben eine Wolframkarbidbeschichtung. Der Ring hat auch miniaturisierte Sensoren und eine Batterie. Der Kontakt zwischen dem Ring und einer Batterie, elektronischen Geräten mit Batterien oder anderem elektrifizierten Metall kann einen Kurzschluss und eine Flamme erzeugen, die den Träger beschädigen und / oder verletzen können.

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

- Den Ring oder die Batterie nicht durchstechen; Halten Sie es für längere Zeit Hitze oder Sonne ausgesetzt.
- Der Ring ist bis zu 100 Meter wasserdicht und schweißfest, was bedeutet, dass Sie Ihren Ring sicher beim Duschen, schnellen Schwimmen, Tauchen usw. tragen können. Wir empfehlen jedoch nicht, den Ring länger als 30 Minuten oder länger als 100 Meter unter Wasser zu tauchen.
- Der Ring kann den täglichen Verschleiß problemlos aushalten. Es besteht aus einer Titanschale mit einer Wolframcarbidbeschichtung. Wir empfehlen jedoch nicht, Ihren Ring zu tragen, während Sie Gewichte heben oder mit schweren oder scharfen Gegenständen arbeiten. Der Ring kann andere Oberflächen (Gold, Silber) zerkratzen und aufgrund der Zugfestigkeit des Materials und des wiederholten Kontakts zerkratzt werden.

Reinigung und Allgemeine Pflege

- Reinigen Sie den Ring mit einem weichen Tuch oder milder Seife und Wasser.
- Reinigen Sie den Ring mit einem feuchten Mikrofasertuch, um Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche zu entfernen.

Produktspezifikation

Abmessungen und Gewichte

- Breite: 8 mm
- Dicke: 2,45mm
- Gewicht: 2,45 bis 3,6 Gramm (je nach Ringgröße)

Batteriekapazität

- Wiederaufladbarer, nicht austauschbarer 24 mAh LiPo-Akku
- Es wird erwartet, dass ein voll aufgeladener Ring bei normalem Gebrauch bis zu 6 Tage hält. Die Akkulaufzeit kann jedoch stark von Nutzungsfaktoren wie Ladezeit des Akkus, Umgebungstemperatur und Nutzungshäufigkeit abhängen.

Aufladezeit

Es dauert durchschnittlich 2-3 Stunden, um den Ring vollständig von 0% auf 100% aufzuladen%.

Ultrahumanes Ringladegerät

Die Ring Ladestation ist wasserempfindlich und nur für die Verwendung mit dem Ring vorgesehen. Bringen Sie die Ladestation nicht mit Wasser und nassen Oberflächen in Berührung und verwenden Sie sie nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmern und Saunen.

Kompatibilität mit Mobilgeräten

Der Ring ist kompatibel mit iPhones mit iOS 14 oder höher und Android-Geräten mit Android 6 oder höher.

Speicherkapazität

Der Ring hat einen eingebauten Speicher von bis zu 6 Tagen und kann Daten speichern, auch wenn Ihr Ring nicht mit der Ultrahuman-App synchronisiert ist.

Synchronisieren Sie den Ring alle 4 Tage mit der Ultra Human-App, um fehlende Daten zu vermeiden. Wir empfehlen, jeden Tag zu synchronisieren.

Daten gehen verloren, wenn der Akku leer ist, ohne mit der Ultra Human-App synchronisiert zu werden. Die Datenspeicherung erfolgt als First-In-First-Out-Muster, was bedeutet, dass die neuen Datentage die ältesten überschreiben, wenn sie nicht mit dem Mobilgerät synchronisiert werden.

Veröffentlichung

Die äußere Hülle des Rings besteht aus Titan. Es ist mit Wolframkarbid beschichtet, was es widerstandsfähig gegen alltägliche Abnutzung macht. Der Innenumfang des Rings besteht aus hypoallergenem Harz.

Wasserabweisend

Es hält dem Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 100 Metern stand.

ESD-sicher

Der Ring ist ESD-sicher, was bedeutet, dass der Ring keine elektrostatischen Stöße verursacht.

EMF-Strahlung

Der Ring nutzt Energie effizient. Es kommuniziert nur beim Öffnen der Ultrahuman-App oder in regelmäßigen Abständen über BLE (Bluetooth Low Energy) mit dem Smartphone. Dies unterscheidet sich von einem Bluetooth-Headset, Ohrhörern oder einer Smartwatch, die sich ständig mit dem Smartphone verbindet und Daten sendet / empfängt.

Die Bluetooth-Aktivität auf dem Ring fällt an einem Tag unter 1%. Daher ist die EMF-Strahlung für den Ring viel geringer als bei anderen Bluetooth-Wearables und gilt in Bezug auf EMF als eines der sichersten tragbaren Geräte für das Fitness-Tracking.

Vorsicht bei Hautreizungen

Die Innenseite des Rings (eine in Kontakt mit der Haut) ist ein transparentes hypoallergenes Material auf Kunststoffbasis. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Oberfläche, die mit der Haut in Berührung kommt, allergische Reaktionen hervorruft. Wenn in einem unwahrscheinlichen Szenario aufgrund des Rings Rötungen oder Reizungen an Ihrem Finger auftreten, entfernen Sie ihn sofort. Wenn die Symptome länger anhalten, suchen Sie bitte einen Dermatologen auf. Zögern Sie nicht, unser Support-Team über die Ultrahuman-App zu kontaktieren, wenn Sie auf Probleme stoßen oder nicht medizinische Anleitung benötigen.

Tipps zum Entfernen eines festsitzenden Rings

Ihre Fingergröße kann von Tag zu Tag und tagsüber aufgrund verschiedener Faktoren wie Zeit, Nahrung, Bewegung und Höhenänderungen variieren. Wenn Sie beim Entfernen des Rings von Ihrem Finger auf Schwierigkeiten stoßen, probieren Sie die folgenden Tipps aus:

- Befeuchten Sie Ihren Finger mit kaltem Wasser und milder Seife und drehen Sie den Ring langsam, um ihn zu entfernen.
- Heben Sie Ihre Hand über Ihr Herz, bis der Blutdruck sinkt, und versuchen Sie dann, sie zu entfernen.

In Notfällen oder wenn Sie den Ring nicht selbst entfernen können, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Die meisten Krankenhäuser sind mit den notwendigen Werkzeugen ausgestattet, um Titan sicher zu schneiden.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Fragen zu den ersten Schritten mit dem Ring oder zur Verwendung der Ultra Human-App haben, lesen Sie bitte die häufig gestellten Fragen (FAQs) unter <https://www.ultrahuman.com/ring/faq/>

Wenn Sie die relevante Frage nicht finden können, wenden Sie sich über die Ultra Human-App an das Ultra Human-Support-Team oder senden Sie eine E-Mail an support@ultrahuman.com

Medizinischer Haftungsausschluss

Der Ring ist kein medizinisches Gerät. Es ist nur zur Aufrechterhaltung und Förderung eines gesunden Lebensstils und des allgemeinen Wohlbefindens gedacht. Der Ring ist nicht für das Krankheitsmanagement, die Behandlung oder die Prävention gedacht und sollte nicht für Diagnose-, Behandlungs-, Management- oder Dosierungsentscheidungen herangezogen werden. Wir beabsichtigen nicht, professionelle medizinische Gutachten zur Behandlung, Diagnose, Vorbeugung oder Linderung von Krankheiten oder Behinderungen zu ersetzen. Konsultieren Sie immer einen Arzt oder eine qualifizierte medizinische Fachkraft, bevor Sie Medikamente, Routine oder Ernährung ändern, wenn Sie gesundheitliche Probleme und / oder Bedenken haben. Bitte denken Sie daran, dass, wenn bei Ihnen eine Krankheit diagnostiziert wurde, auch die Genauigkeit der Biomarkerdaten beeinträchtigt sein kann. Wenn Sie Änderungen an Ihrer Gesundheitsroutine auf der Grundlage unserer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich des Rings, vornehmen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie dies vollständig auf eigenes Risiko tun.

Kinder

Bitte bewahren Sie den Ring außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren bestimmt. Wenn Sie vermuten oder wissen, dass ein Kind den Ring verschluckt hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Vereinbarung

Ihre Nutzung des Rings und der Ultrahuman-App unterliegt unseren Verkaufsbedingungen, Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen, die auf unserer Website verfügbar sind. Die oben in diesem Handbuch aufgeführten Bedingungen sind in den FAQs, Verkaufsbedingungen, Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien unserer Website enthalten und können geändert werden, wenn wir unsere FAQs, Verkaufsbedingungen, Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien ändern.

Garantieinformationen

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

Abgesehen von der ausdrücklich für den Ring angegebenen Garantie stellen Ultrahuman und seine verbundenen Unternehmen den Ring und die Dienste "wie besehen" ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantien zur Verfügung. Ultrahuman und seine Partner, Lieferanten und verbundenen Unternehmen geben keine Garantien in Bezug auf den Betrieb, die Inhalte oder die Informationen, die über die Ultrahuman-Dienste, einschließlich des Rings, zur Verfügung gestellt werden. Das Unternehmen und seine Partner, Lieferanten und verbundenen Unternehmen lehnen jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien der Marktgängigkeit, des Eigentums, der Eignung für einen bestimmten Zweck und der Nichtverletzung von Rechten. Darüber hinaus garantiert Ultrahuman weder die ununterbrochene Verfügbarkeit, Sicherheit oder den fehlerfreien Betrieb der Ultrahuman-Dienste, einschließlich des Rings, noch dass Mängel behoben werden. Darüber hinaus stellt das Unternehmen nicht sicher, dass die Ultrahuman-Dienste, einschließlich des Rings, frei von Viren oder anderen potenziell schädlichen Komponenten sind.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR DEN RING

Ultrahuman bietet eine beschränkte Garantie für einen Zeitraum von einem Jahr ab Lieferdatum an den Käufer gegen Material- und Verarbeitungsfehler für neue Ringe. Diese Garantie kann über ein Jahr hinaus verlängert werden, wenn das örtliche Recht zum Zeitpunkt der Lieferung eine längere Garantiezeit vorschreibt. Innerhalb der Garantiezeit repariert oder ersetzt Ultrahuman den defekten Ring kostenlos für den Käufer, aber die Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers. Das Ersatzprodukt kann neu oder generalüberholt sein, je nach Ermessen von Ultrahumans.

Ultrahuman haftet nicht für Verluste oder Schäden, einschließlich Datenverlust, die sich aus der Nichtbeachtung von Anweisungen zur Verwendung des Rings ergeben.

Diese Garantie gilt nicht: (a) für Verschleißteile wie Batterien oder Schutzbeschichtungen, die im Laufe der Zeit abnehmen, es sei denn, der Ausfall ist auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen; (b) für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen, es sei denn, der Ausfall ist auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen; (c) für Schäden, die durch die Verwendung mit einer Komponente oder einem Produkt eines Drittanbieters verursacht wurden, die mit den Produkten und Dienstleistungen von Ultrahuman nicht kompatibel sind; (d) für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Missbrauch, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen verursacht wurden; (e) für Schäden, die durch die Verwendung des Rings unter Verstoß gegen

diese Bedingungen, Nutzungsbedingungen, FAQs, Verkaufsbedingungen und andere anwendbare Bedingungen verursacht wurden; (f) für Schäden, die durch Dienste (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) verursacht wurden, die von einer anderen Person als Ultrahuman ausgeführt wurden; (g) an einen Ultrahuman-Ring, der ohne schriftliche Genehmigung von Ultrahuman modifiziert wurde, um die Funktionalität oder Leistungsfähigkeit zu ändern; (h) für Schäden, die durch normale Abnutzung oder anderweitig aufgrund der normalen Alterung des Rings verursacht wurden, (i) wenn eine Seriennummer vom Ring entfernt oder unkenntlich gemacht wurde oder (j) wenn Ultrahuman von den zuständigen Behörden Informationen darüber erhält, dass das Produkt gestohlen wurde oder wenn Sie die Aktivierung des Passcodes oder andere Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung des unbefugten Zugriffs auf den Ring nicht deaktivieren können und Sie in keiner Weise nachweisen können, dass Sie der autorisierte Benutzer des Rings sind (z. B. durch Vorlage eines Kaufbelegs). Alle anwendbaren Gesetze werden befolgt.

ULTRAHUMANE MITGLIEDSCHAFT

Ultrahuman-Mitglieder genießen während der Standardgarantiezeit bestimmte Sondervorteile und eine erweiterte Deckung. Um mehr zu erfahren, lesen Sie bitte die FAQs auf der Website unter
- <https://x.ultrahuman.com>

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG


SIE VERSTEHEN UND STIMMEN ZU, DASS WIR, UNSERE DIREKTOREN, MITARBEITER, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LIZENZGEBER, VERTRETER, PARTNER UND LIEFERANTEN IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG IN KEINEM FALL IHNEN ODER DRITTEN GEGENÜBER FÜR INDIREKTE, FOLGE-, EXEMPLARISCHE, ZUFÄLLIGE, SPEZIELLE, STRAFENDE ODER ANDERE VERLUSTE ODER SCHÄDEN JEGLICHER ART HAFTEN, EINSCHLIEßLICH ENTGANGENER GESCHÄFTSGEWINNE, BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN, COMPUTERAUSFÄLLE, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATIONEN ODER ANDERER VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT FOLGENDEM ERGEBEN: (A) DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN, DEN VERKAUFSBEDINGUNGEN VON ULTRAHUMAN RING, JEDER ANDEREN AUF DER ULTRAHUMAN-WEBSITE VERFÜGBAREN RICHTLINIE; (B) IHRE NUTZUNG ODER UNFÄHIGKEIT, UNSERE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN ZU NUTZEN; (C) DAS VERHALTEN ODER DIE INHALTE ANDERER BENUTZER ODER DRITTER AUF ODER ÜBER DIE DIENSTE; ODER (D) UNBEFUGTER ZUGRIFF ODER UNBEFUGTE NUTZUNG, SELBST WENN WIR AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. DIE MAXIMALE GESAMTHAFTUNG VON ULTRAHUMAN IHNEN GEGENÜBER IST AUF EINHUNDERT INDISCHE RUPIEN (INR 100) BESCHRÄNKT, UNABHÄNGIG VON DER FORM DER KLAGE ODER DES ANSPRUCHS, Z. B. VERTRAG, GARANTIE, UNERLAUBTER HANDLUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG, FAHRLÄSSIGKEIT ODER EINER ANDEREN RECHTSTHEORIE. ULTRAHUMAN ODER DRITTE, DIE IHNEN DEN ZUGANG UND DIE NUTZUNG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN ERMÖGLICHEN ODER INFORMATIONEN UND INHALTE AUF DER PLATTFORM BEREITSTELLEN, HAFTEN NICHT FÜR PERSONENSCHÄDEN,

EINSCHLIEßLICH TOD, VERURSACHT DURCH IHRE NUTZUNG ODER MISSBRAUCH DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN. DIE ANGEBOTENEN PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN SIND IN KEINER WEISE ALS ERSATZ FÜR EINE PERSÖNLICHE KONSULTATION MIT EINEM ARZT GEDACHT. ULTRAHUMAN RÄT DEN BENUTZERN, EINE UNABHÄNGIGE BEWERTUNG HINSICHTLICH IHRER GENAUIGKEIT, NÜTZLICHKEIT UND EIGNUNG VORZUNEHMEN, BEVOR SIE EINE ENTSCHEIDUNG IM VERTRAUEN AUF DIESE TREFFEN.

WARNUNG

Dieses Produkt kann Chemikalien enthalten, von denen der Bundesstaat Kalifornien weiß, dass sie Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen zu Proposition 65 Chemikalien finden Sie unter: <https://www.p65warnings.ca.gov/>

Rechte an geistigem Eigentum

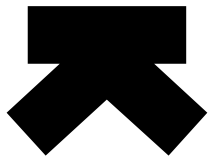


**ULTRAMAN, ULTRAMENSCHLICHER RING,
ULTRAMENSCHLICHER R1**

UND das oben abgebildete ULTRA HUMAN LOGO sind Marken oder eingetragene Marken von Ultra human Healthcare Private Limited. Patentiert und zum Patent angemeldet. © Ultrahumanes Gesundheitswesen Private Limited 2020-2023. Alle Rechte vorbehalten.

Regulatorischen

USA

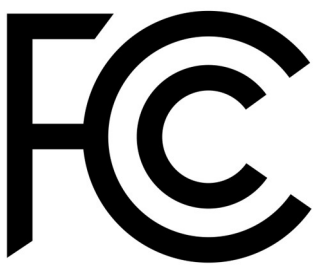

FCC ID: 2A99X-ULTRAHUMAN01

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR DEN ULTRAHUMAN RING

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Ultrahuman genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben. Mit diesem Gerät müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden, um die Einhaltung der FCC-Grenzwerte der Klasse B sicherzustellen.

Verantwortliche Partei für die FCC Konformität:

Stelcore Management Services LLC Suite 4000,
17 Staatsstraße, New York, Vereinigte Staaten,
NY 10004 USAsupport@stelcoregroup.com | +1 302
261-5337

LADEGERÄT

Dieses Gerät entspricht Teil 18 der FCC-Vorschriften.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

BEACHTEN: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein ISM-Gerät gemäß Teil 18 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Mit diesem Gerät müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden, um die Einhaltung der FCC-Grenzwerte der Klasse B zu gewährleisten. Diese HF-Beleuchtungsgeräte können Funkgeräte stören und sollten nicht in der Nähe von Seeverkehrskommunikationsgeräten oder anderen kritischen Navigations- oder Kommunikationsgeräten installiert werden, die zwischen Frequenzbereich: 0,45-30 MHz.

Dieses Gerät entspricht Teil 18 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt der Bedingung, dass dieses Gerät keine schädlichen Störungen verursacht.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

KANADA

IC

IC: 30138-ULTRAHUMAN1

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS(s) von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

Hinweis zur Einhaltung der Vorschriften fuer Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung Kanada (ISDE) das vorliegende Gerät (IC: 30138-ULTRAHUMAN1) entspricht den CNRS fuer Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung Kanada, die fuer lizenzfreie Funkgeräte. Die Ausbeutung ist


unter den folgenden zwei Bedingungen zulässig: (1) das Gerät darf keine Störung erzeugen; (2) der Benutzer des Geräts muss jede erlittene funkelektrische Störung akzeptieren, auch wenn die Störung den Betrieb beeinträchtigen könnte.

HF-EXPOSITIONSSICHERHEIT

Dieses Produkt ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass es die vom ISED festgelegten Emissionsgrenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie (HF) nicht überschreitet. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Dieses Produkt ist ein Funksender und-Empfänger. Il ist um die Emissionsgrenzen für die exposition gegenüber radiofrequenzenergie (RF) nicht zu überschreiten, die durch ISDE. Der Sender darf nicht mit anderen antennenoder anderen Sendern zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten.

EU und Großbritannien

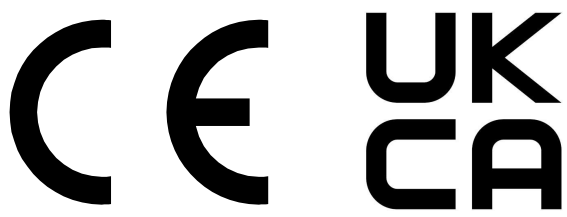

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Ultrahuman erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen Anforderungen gemäß entspricht

1. EN 50566:2017
2. ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
3. IEC 62368-1:2018 / EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
4. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
5. (ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11))
6. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) (EN 55032:2015)
7. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) (EN 61000-4-2:2009)
8. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) (EN 61000-4-3:2006+A1+A2)

UND FOLGENDE RICHTLINIEN

1. Die Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU
2. ROHS-Richtlinie 2011/65/EU mit Änderung (EU) 2015/863
3. Waste electrical and electronic equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU
4. Die Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU

Wenn Sie eine CE-Konformitätserklärung oder UK CA-Konformitätserklärung anfordern möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an ring@ultrahuman.com.

JAPAN



[R]012-230007

Ultrahuman Ring wurde die Zertifizierung gemäß Artikel 38-24 des Funkgesetzes erteilt.

INDIEN WPC

Das oben gezeigte Bild zeigt an, dass Ultrahuman Ring den WPC-Standards entspricht.

TAIWAN



CCAP24LP0330TO



CCAP24LP0340TO

VAE



Das oben gezeigte Symbol bedeutet, dass Ultrahuman Ring ECAS - ROHS-konform ist.



Das oben gezeigte Bild zeigt an, dass Ultrahuman Ring TDRA-konform ist.

NEUSEELAND UND AUSTRALIEN



Netzteile, die mit bestimmten elektronischen Geräten (IT, Audio, Video) ausgestattet sind oder mit diesen verwendet werden:


- Relevante Sicherheitsnorm AS/NZS 62368. 1.
- In der Bescheinigung und in den Anweisungen muss angegeben werden, 'zur Verwendung mit Audiogeräten' oder 'Zur Verwendung mit Videogeräten' oder 'Zur Verwendung mit Informationstechnologiegeräten' oder 'Zur Verwendung mit Audio-, Video- und Informationstechnologiegeräten', wie zutreffend.

RoHS-konform



Im Rahmen der Beschränkung schädlicher Substanzen aus unseren Produkten entsprechen Ultrahuman Ring und Ladegerät den strengen Anforderungen der Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Substanzen in Elektro- und Elektronikgeräten der E-Waste (Management) Rules, 2016, auch bekannt als die RoHS-Richtlinie.

ENTSORGUNGS- UND RECYCLINGINFORMATIONEN FÜR ULTRAHUMAN RING UND LADEGERÄT.

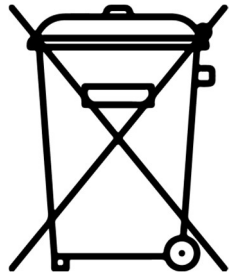

Das oben gezeigte Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt und/oder Ihre Batterie, wenn sie das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, nicht als normaler Abfall entsorgt werden sollten. Vielmehr muss es bei einer von den örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstelle deponiert werden, um eine angemessene Verwertung und Entsorgung sicherzustellen. Dies wird dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und gleichzeitig dem Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch geeignete Recyclingmethoden Vorrang einzuräumen.

Technische Daten (Ring)

Veröffentlichung

- Langlebiges Titan
- PVD-Beschichtung
- Allergikerfreundliche, nichtmetallische, nahtlose Innenformung
- Wasserdicht bis 100m/328 ft.

Gewicht & Abmessungen

- Breite: 8 mm
- Dicke: 2,45mm
- Gewicht: 2,45 bis 3,6 Gramm (je nach Ringgröße)

Konnektivität

- Bluetooth Niedrigenergie
- Automatische Firmware-Updates über die Ultrahuman-App
- EMF-sicher

Batteriestrom

- Bis zu 4-6 Tage Akkulaufzeit
- Volle Ladung in 2-3 Stunden

Drucksensoren

- Photoplethysmographie (PPG) -Sensor (für HR und Blutsauerstoff)
- Hauttemperatursensor (Ferninfrarotsensor)
- 6DOF Bewegungssensor

Weitere wichtige Spezifikationen

- Betriebstemperatur: -5 bis 50 Grad.C
- BLE sendeleistung: 0 dBm (1 mw)
- BLE-Frequenz: 2402 bis 2480 MHz

Technische Daten (Ladegerät)

Veröffentlichung

- Aluminium
- PC-Kunststoff
- Siliconkautschuk

Gewicht und Abmessungen

- Breite: 40 mm
- Länge: 40 mm
- Höhe: 20 mm
- Gewicht: 25, +/- 2 Gramm (je nach Größe)

Stromversorgung

- 5 Volt Gleichstrom und zwischen 0,25 Ampere und 1 Ampere.

Bei Rückfragen schreiben Sie bitte an
feedback@ultrahuman.com

2. und 3. Stock, 49/1 49/3 Grundstück Nr. 4 Khatha Nr. 1106, MORGENS Kammern, Garvebhavipalya 7. Meile Hosur Road, Bengaluru, Bengaluru Urban, Karnataka, 560068

Ultra human Health care SP LLC, 4. Etage, Etihad Airways Center, Al Raha, Al Muneera, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Ultra human Healthcare Limited, 5 Neuer Straßenplatz, London, Vereinigtes Königreich, EC4A 3TW

Entworfen in Frankreich, VAE, Indien